

STERILE SAFETY-VAC 1000+ PRE-VAC WOUND DRAINAGE BOTTLE 1000ml

Vac 1000 de seguridad no estéril y la botella de drenaje de la herida pre-vac 1000ml

REF : SV1000-S



Internally and externally sterile if package is unopened or undamaged.

Re-use of this product will cause the risk of cross infection and unpredictable health threat.


Estéril interna y externamente si el paquete está sin abrir o en buen estado.

Utilizando este producto otra vez incrementará el riesgo de infección cruzada y es una amenaza de salud impredecible.

Directions for use

1. Open the sterile pouch and remove the bottle aseptically.
2. Inspect the vacuum indicator to ensure that it is completely compressed. If not, do not use this product.
3. CLOSE CONNECTION TUBE ROLLER CLAMP FIRST. Attach male luer connector of the connecting tube to Female luer of patient drainage device.
4. After checking that all connections are secure, open the slide clamp on the bottle to activate the vacuum.
5. Open the tube roller clamp on the drain-line to begin drainage procedure.
6. If necessary, you may adjust the flow rate during the drainage procedure.
7. Repeat steps 1 to 5 with a new bottle if the bottle is almost full and further drainage is required.
8. Discard the bottle as per your local requirements.


1. Abre el paquete y quita la botella asépticamente.
2. Mira el indicador vacío para asegurar que es completamente comprimido.
3. CIERRA LA TAPA DEL RODILLO DEL TUBO DE CONEXIÓN PRIMERO. Conecte el conector luer macho del tubo de conexión al luer femenino del dispositivo de drenaje del paciente.
4. Después de asegurar que todas las conexiones son seguras, abra la abrazadera deslizante que está sobre la botella para activar el vacío.
5. Abre la abrazadera de rodillo de tubo sobre la línea de drenaje para empezar el procedimiento de drenaje.
6. Si necesita, se puede ajustar el caudal durante el procedimiento de drenaje.
7. Repite pasos 1-5 con una nueva botella si la botella es casi llena y necesita más drenaje.
8. Deseche la botella según sus requisitos locales.

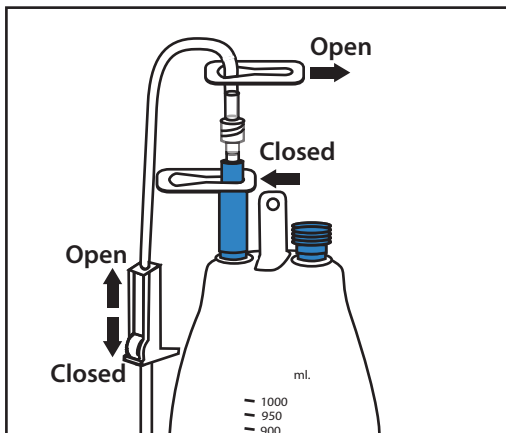

STERILE EO



LATEX FREE

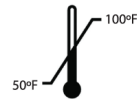

Distributed Exclusively in the United States by:



Jigsaw Medical

1012 Airpark Dr. Suite 1, Sugar Grove, IL 60554
Tel: 630-587-0019 | Fax: 630-524-9088
Email: Fax@jigsawmed.com
www.jigsawmed.com

Manufactured by:

POLY MEDICURE LIMITED

Plot No. 104-105, HSIDC Industrial Area,
Ballabhgarh-121004, Faridabad, India

Customer Care No. (0129) 4287053

For providing feedback on this product write to customercare@polymedicure.com